



JustFlow C Series

Dial flowmeter
Caudalímetro de pasos
Débitmètre pas à pas

Dial flowmeter

Appropriate for use in hospitals with a gas network.

Turning the top control button with "click" position, the selected flow appears in the front window.

Models

- Direct output to humidifier jar
- Output with flow selection, which diverts the flow through a humidifier jar or a front spigot for flexible hose, if necessary

Can be provided individually or on a dual version, and it can be mounted either with a direct connector, a clamp to a rail or a Ø38,0 mm bar flange.

Caudalímetro de pasos

Apropiado para uso en centros hospitalarios con red de gas canalizado. Girando el mando superior con posicionamiento por "click", aparece en la ventana frontal el caudal seleccionado.

Modelos

- Salida directa a vaso humidificador
- Salida con selección de flujo, que desvía el flujo a través de un vaso humidificador o a una espiga frontal para tubo, si fuese necesario.

Pueden ser suministrados en versión individual o dobles y estar montados con conector directo a toma, sobre una grapa para aíl o brida rápida para barra de Ø38,0 mm.

Débitmètre pas à pas

Appropriés pour être utilisés dans les hôpitaux munis d'un réseau de gaz canalisé.

En tournant la commande supérieure avec positionnement "clic", le flux sélectionné apparaît dans la fenêtre avant.

Modèles

- Sortie directe vers le flacon humidificateur
- Sortie avec sélection de flux, qui dévie le flux à travers un récipient d'humidificateur ou un embout de tube avant, si nécessaire.

Ils peuvent être fournis en version simple ou double et être montés avec un connecteur direct sur la prise, sur un serre-rail ou une bride rapide pur barre Ø38,0 mm.



With stabilized pressure

Available models with a previous regulation stage to stabilize the possible differences of pressure existing in the supply network, getting a better precision in the supplied flow.

Models

- Direct output to humidifier jar.
- Output with flow selection, which diverts the flow through a humidifier jar or a front spigot for flexible hose, if necessary.

Can be provided individually or on a dual version, and it can be mounted either with a direct connector, a clamp to a rail or a Ø38,0 mm bar flange.

Con presión estabilizada

Disponible con etapa previa de regulación para estabilizar las posibles diferencias de presión existentes en el suministro consiguiendo una mejor precisión en el flujo suministrado.

Modelos

- Salida directa a vaso humidificador.
- Salida con selección de flujo, que desvía el flujo a través de un vaso humidificador o a una espiga frontal para tubo, si fuese necesario.

Pueden ser suministrados en versión individual o dobles y estar montados con conector directo a toma, sobre una grapa para raíl o brida rápida para barra de Ø38,0 mm

Avec pression stabilisée

Vous disposez de modèles avec une étape de réglage préalable de régulation afin de stabiliser des différences éventuelles de pression dans l'alimentation, obtenant ainsi une meilleure précision dans le flux.

Modèles

- Sortie directe vers le flacon humidificateur
- Sortie avec sélection de flux, qui dévie le flux à travers un récipient d'humidificateur ou un embout de tube avant, si nécessaire.


Ils peuvent être fournis en version simple ou double et être montés avec un connecteur direct sur la prise, sur un serre-rail ou une bride rapide pur barre Ø38,0 mm.



Connectors / Conectores / Conneteurs



DIN 13260-2

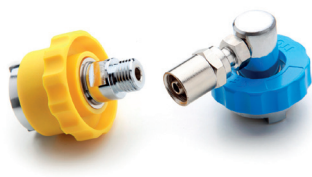

NF S 90-116



NF S 90-116



SS 8752430

Models/Modelo/Modèle		Materials Materiales Matériaux	Weight Peso Poids	Dimensions Dimensiones Dimensions	Inlet pressure Presión de alimentación Pression d'alimentation	Scales availables Escala disponibles Échelles disponibles	Inlet connection Conexión de entrada Conexión d'entrée	Output connection Conexión de salida Connexion de sortie	Gases available Gases disponibles Gaz disponibles
Without stabilized pressure Sin presión estabilizada Sans pression stabilisée	Without flow selector Sin selector de flujo Sans sélecteur de flux	Anodized aluminium, ABS, stainless steel and chrome-plated brass.	140 g	ø40 x 47 mm	4,5 ± 0,5 bar	0-0,2-0,4-0,6-0,8-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 l/min 0-0,3-0,6-1-1,5-2-3-4-5-6-7-8 l/min 0-0,5-1-2-3-4-5-6-8-10-12-15 l/min 0-1-2-4-6-8-10-12-15-20-25-30 l/min 0-3-6-10-15-20-25-30-35-40-45-50 l/min 0-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70 l/min	DIN 13260 NF S 90-116 BS 5682 SS 8752430 ISO 18082 (NIST) CGA V-5 (DISS)	DISS 9/16" (O ₂) Nipple for tube (other gases)	O ₂ Medical Air O ₂ /He (Mix) CO ₂
	With flow selector Con selector de flujo Avec sélecteur de flux		240 g	ø40 x 60 mm					
With stabilized pressure Con presión estabilizada Avec pression stabilisée	Without flow selector Sin selector de flujo Sans sélecteur de flux	Aluminio anodizado, ABS, acero inoxidable y Latón Cromado.	190 g	ø40 x 47 mm	4,5 ± 0,5 bar	0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,55-0,6-0,7-0,8-0,9-1 l/min 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 l/min 0-0,5-1-2-3-4-5-6-8-10-12-15 l/min	• Other standard consult • Consultar otros estándares • Consulter d'autres normes	DISS 9/16" (O ₂) Espiga para tubo (otros gases)	
	With flow selector Con selector de flujo Avec sélecteur de flux		290 g	ø40 x 60 mm					



11VSHM2000

CE
0051

Sterilizable humidifier bottle
Frasco humidificador esterilizable
Flacon humidificateur stérilisable



11VSHM5000

CE
0051

Disposable humidifier bottle
Frasco humidificador desechable
Flacon humidificateur jetable



12SDISXDIS

CE
0051

Flow selector
Selector de flujo
Sélecteur de flux



09MSTC1M00

Average concentration mask
Mascarilla de concentración media
Masque de concentration moyenne

09MSTC2M00



09MSCT1A00

High concentration mask
Mascarilla de concentración alta
Masque de concentration haute



09ALRG0002

Oxygen extension lead
Alargadera de oxígeno
Extension de l'oxygène



12DISX2T25

CE
0051

DISS connector for flexible hose (25 units)
Conector DISS para tubo (25 unidades)
Connexion DISS pour tube flexible (25 unités)